



## Kezelési útmutató

### A készülék általános ismertetése

A készülék a Földünk életmegtartó rezgését - Schumann-frekvencia – felerősítve sugározza a speciális, formatervezett antennáján keresztül.

Ez a felerősített rezgés segíti az érzelmileg "lehangolt", energetikailag alul működő embert, megnyugodni, megkönnyülni a nyomasztó gondolatoktól, érzelmi terhektől.

Alkalmazója rövid idő alatt energetikailag megtisztul a nyomasztó, negatív gondolatoktól, erőktől, és már pár perc után megnyugodva, szinte kipihenve érezheti magát. A megnyugvás azt is jelenti, hogy a kusza, káoszos gondolatokat is lecsökkenti - így megkönnyíti a meditálást olyanoknál is, akik ezt eddig nem tudták művelni. Ugyanezen okból komolyan segíti a depresszív, pánik gondolatoktól való eltávolodást, könnyülést, lelki terhek letételét.

Ezen változások pedig elindítanak egy folyamatot, amely eredményeként az energetikailag megújuló szervezet, az immunrendszer egyre jobban kezd működni – változások következhetnek be a fizikai állapotban is.

A készüléket **TÉRHARMONIZÁLÁS**-ra, valamint kristály- és homeopátiás rezgések felerősítésével, Schumann-rezgéshez keverésével összetett kezelésekre is lehet használni.

### Mire figyeljek? – BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**2.1. A készüléket csak saját felelősségére használhatja!**

**2.2 A készüléket csak ezen „Kezelési útmutató” elolvasása és megértése után alkalmazza!**

**2.3. A készülék megbontása a garancia elvesztésével jár, valamint életveszélyes és éppen ezért TILOS!**

**2.4. A készülék a „közérzet javító készülékek” csoportjába tartozik, nem gyógyászati alkalmazásra készült. Nem helyettesíti az orvosi diagnosztikát, kezelést.**

2.5. A készüléket várandós kismamák, szívritmus-szabályozót használók, epilepsziában szenvedők semmilyen körülmények között **NEM** alkalmazhatják!


2.6. A készüléket vízzel nedvesített törlőkendővel tisztítsa! A készülékbe ne jusson nedvesség! Amennyiben mégis ez történik, a készülék kiszáradásáig ne használja!

### Bekapcsolás előtti tudnivalók


A készülék nem tartalmaz hálózati kapcsolót, ennek megfelelően hálózatra csatlakoztatás után azonnal üzemelni kezd. A hálózati feszültség meglétekor az üzemmód választó kapcsolóval kiválasztott üzemmódnak megfelelő LED villogása mutatja az üzemelést.

A kimeneti csatlakozón jelenik meg a készülék által keltett Schumann-rezgés. Ide kell csatlakoztatni az antenna elektromos csatlakozóját, még a bekapcsolás előtt.

A készülék előlapja az alábbi ábrán látható.

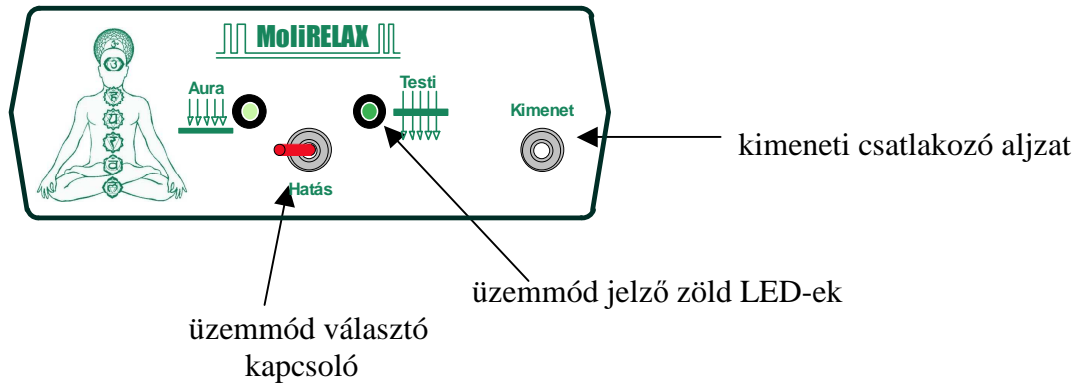

Az antenna több rétegű nemes fa burkolatban van elhelyezve. A fa burkolat biztosítja a beépített áramkör védelmét. Ez az áramkör biztosítja a jel megfelelő kisugárzását. A fa burkolaton levő szimbólumok az alkalmazást segítik a kezeléseknél.

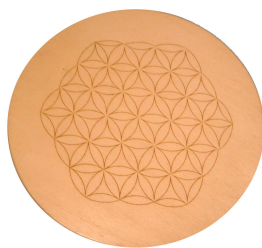

**„ÉLET VIRÁGA”**

oldal

oldal

**„FÖLDANYA”**



## Üzem módok – melyiket válasszam, hogyan használjam?

Az előlapi választó kapcsolóval kétféle üzemmód között választhatunk:

### 1. **AURA** kapcsoló állás

Ebben az üzemmódban villamos térerőt sugároz az antenna. Ez a fajta sugárzás az aurára hat elsődlegesen. Energetikailag "fentről-lefelé" hat a megtisztulás. Leginkább általános erősítés esetén célszerű választani, továbbá nyomasztó gondolatok, gondolati, lelki terhek, esetén kifejezetten hatásos.

Az antenna polaritását a jelképek mutatják. Mindig úgy használja ezen üzemmódban, hogy az „**ÉLET VIRÁGA**” oldala legyen a test felé, azaz erre üljön, erre feküdjön.

A kezelés minimális ideje néhány perc. Hosszabb idejű használata semmilyen negatív hatással nem jár.

### 2. **TESTI** kapcsoló állás

Ebben az üzemmódban mágneses térerőt sugároz az antenna. Ez a fajta sugárzás belsőleg, a testre hat elsődlegesen. Ez a hatás energetikailag "belülről-kifelé", "alulról-felfelé" nyilvánul meg. Ezt olyankor célszerű alkalmazni, amikor fázó érzetünk van, összehúznánk magunkat.

Ezt az üzemmódot két lépésben használja.

Először a „**FÖLDANYA**” oldala legyen a test felé, azaz erre üljön, erre feküdjön. Az antenna által sugárzott mágneses térerő ennél az állásnál levő pólusha segíti az összehúzó, „fázó” szerveket az energetikai tisztulásban.

A kezelés ideje legalább öt perc legyen.

Ezután használja az „**ÉLET VIRÁGA**” oldalt a test felé fordítva. A kezelés ideje most is legalább öt perc legyen.

## **További lehetőség – Összetett kezelés: kristályerő + Schumann-hullám**

A készülék által keltett Schumann-rezonancia sokszorosára felerősíti a kristályok, homeopátiás szerek, gyógynövények saját rezgését. Az így felerősített rezgés hozzáadódik az eredeti Schumann-hullámhoz és összetetten lesugárzódik az antennán keresztül.

A használni kívánt kristályt, egyéb szert a készülék tetején levő tálcára tegye, és a készüléken az „AURA” üzemmódot válassza ki. A kezelést továbbiakban a már leírtak szerint végezze.

## **További lehetőség – TÉRHARMONIZÁLÁS**

Ebben az alkalmazásban szükségtelen az antenna használata.

A használni kívánt kristályt, egyéb szert a készülék tetején levő tálcára tegye, és a készüléken az „AURA” üzemmódot válassza ki. A készülék által keltett Schumann-rezonancia sokszorosára felerősíti a kristályok saját rezgését, ami kihullámszik a térbe, és kifejti hatását.

## **További lehetőség – Kristályok erősítése**

Térharmonizálás, kristály-kezelés közben a kristályok saját kisugárzása sokszorosára növekszik a Schumann-hullám hatására, miközben a kisugárzott „kristály-információ” nem változik. Az erősödés kristály típustól függően 6-8-10-szeres érték is lehet.

Amikor a kristályt levesszük a tálcáról, rövid idő alatt lecsökken a kisugárzása – viszont jóval magasabb szintre áll be, mint előtte volt. Kristály típustól függően 1,5-2-3-szoros értékeket is tapasztaltunk, tehát KRISTÁLY-ERŐSÍTÉSRE is alkalmas a készülék.

## **További lehetőség – Háziállatok kezelése**

Ahogy az emberre hat a készülék által keltett Schumann-hullám, ugyanígy a háziállatokra is kedvező hatással van.

Orvosi kezelés – pl. műtéti beavatkozás – esetén tegye a háziállat vacca alá a készülék antennáját és „AURA” üzemmódban kezelje a jószágot.

Naponta többször kezelje ily módon kedvencét. Jelentősen lerövidítheti a lábadozás idejét.

Figyeljen az állat reagálására, jelzéseire. Ha esetleg bármilyen módon a kezelés kellemetlen a állatnak, szüntesse be a kezelést.

## **További lehetőség - Ételek-italok harmonizálása**

Az élelmiszerek előállítása, szállítása, forgalmazása során alkalmazott technológiák, az emberi tényezők (negatív gondolatok) megváltoztatják az egyes termények, gyümölcsök, ásványvíz a természetben levő , természetes harmonikus erejét, azaz rendezettség helyett káoszt tartalmaznak.

A készülék megszünteti a KÁOSZ-erőt és harmonizálást eredményez, azaz visszaállítja az eredeti rendezettséget.

Mivel testünk nagy része vízből áll, ami könnyen vesz fel energetikai információt és azt hosszan tárolja – tehát nem mindegy, milyen információt közlünk vele táplálkozás közben.

Tegye a kezelendő ételt-italt az antennára és „AURA” üzemmódban végezze a harmonizálást legalább 1 percig. Utána kis ideig hagyja „pihenni” az élelmiszert, majd fogyaszthatja.

## Tapasztalatok

Hallgasson a megérzéseire. Próbálja ki, mikor-melyik üzemmódra van szüksége, mennyi ideig használja stb.

Az **AURA** kapcsoló állás használata esetén a legtöbb ember bokától induló finom, alig érezhető bizsergésről számol be. Ahogy halad felfelé a bizsergés, melegség érzet is keletkezhet.

Ahol lelki ok eredetű energetikai gát van -- ami legtöbbször a gyökércsakra és a szívcsakra között szokott az ilyen kialakulni -- megakadást lehet érezni a bizsergés felfelé haladásában. Ilyenkor valamennyi idő szükséges az energetikai gát feloldódásához. Ez általában fél-másfél perc közötti idő szokott lenni. Utána intenzíven halad tovább felfelé a megtisztulás.

Az egész folyamat néhány perc alatt lezajlik. A végét is sokan megérik – a fej könnyül meg utoljára. Ekkor abba lehet hagyni a kezelést. Ha folytatják, meggyorsul az egyes szervek energetikai harmonizálódása.

Amikor a szervezet eléri a számára szükséges egyensúlyi állapotot, további erőt már nem „épít be”.

Az energetikai harmonizálás eredményeként a legtöbb ember kellemes, nyugodt állapotról, melegségről számol be.

A **TESTI** kapcsoló állás üzemmódot ritkábban szokták alkalmazni. Ilyenkor is hallgasson megérzésére. Javasolt a **TESTI** kezelés után néhány perces **AURA** kezelés.

## Egyéb

A Moli-BER készülékcsaládról, a használatuk során szerzett tapasztalatokról, az új fejlesztésekről pedig a [www.molizapp.napturul.hu](http://www.molizapp.napturul.hu) honlapon találhat információkat.

## Műszaki adatok

<b>Típus:</b>	MoliRELAX
<b>Gyártó:</b>	Moli-Ber Bt. 1161. Bp. Vörösmarty. 20. <a href="http://www.molizapp.napturul.hu">www.molizapp.napturul.hu</a> <a href="mailto:molizapp@napturul.hu">molizapp@napturul.hu</a>
<b>Garancia:</b>	1év
<b>Táplálás:</b>	230V 50Hz 4VA
<b>Védelmek:</b>	kimeneti rövidzár elleni védelem
<b>Méret:</b>	<b>készülék:</b> 115 x 85 x 45mm <b>antenna:</b> D224 x 9mm
<b>Tartozék:</b>	Kezelési útmutató Antenna



( ugrás a honlapra)